


TERAPIA DE ULTRASONIDO

PhysioGo.Lite SONO

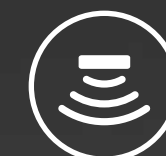

ASTAR.

Calle Swit 33
43-382 Bielsko-Biala
Polonia

números de teléfono

+48 33 827 18 69

+48 33 827 18 56

export@astar.eu

www.astar.eu



Artículos temáticos
www.ephysiotechnology.com

U-PLS/ES-22-V1

ASTAR.

PhysioGo.Lite SONO



La terapia de ultrasonidos se utiliza ampliamente en las clínicas de fisioterapia para tratar el dolor musculoesquelético mediante tratamientos físicos.

El PhysioGo.Lite SONO es un dispositivo que permite realizar una terapia de ultrasonidos eficaz tanto en las consultas de fisioterapia como durante visitas a domicilio a los pacientes. La avanzada tecnología de Astar es una garantía de fiabilidad y precisión de los parámetros. El aparato, gracias a los programas de tratamiento incorporados, facilita al fisioterapeuta a conseguir los mejores efectos posibles de las ondas de ultrasonido.

Descubra por qué debería elegir PhysioGo.Lite SONO.



PANTALLA EN COLOR DE 5" CON PANEL TÁCTIL FUNCIONAL



3 TIPOS DE CABEZALES DE ULTRASONIDOS: SnG, GU-1, GU-5



PUEDE FUNCIONAR CON BATERÍA. LA BATERÍA PUEDE SER INSTALADA POR EL USUARIO



PERMITE REALIZAR TERAPIA CON ULTRASONIDO PULSADO



BASE DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INCORPORADOS



NÚMERO DE PROGRAMAS DE USUARIO



EL CABEZAL GU-1

Con una área del frente de 1 cm², produce una onda de frecuencia de 1 o 3 MHz. Se utiliza para el tratamiento de pequeñas áreas del cuerpo en la terapia de ultrasonido clásica, el tratamiento LIPUS y la terapia combinada.

EL CABEZAL GU-5

con una área del frente de 5 cm² (1 o 3 MHz), se utiliza en la sonoterapia y en los tratamientos por fonoforesis. Este tipo de cabezal estándar también permite realizar la terapia LIPUS y la terapia combinada.



EL CABEZAL SnG

Una novedad en la gama de dispositivos de ultrasonidos de Astar, es un accesorio que para su funcionamiento no requiere la participación de un operador, con un área del frente grande (17,3 cm² o 34,5 cm² según el modo de funcionamiento seleccionado), que se utiliza para la terapia clásica de ultrasonidos, la fonoforesis, la terapia LIPUS y los tratamientos combinados (en combinación con la electroterapia).

NOVEDAD EN NUESTRA OFERTA



COMODIDAD DE USO



BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO INCORPORADOS

PhysioGo.Lite SONO contiene una base de datos de programas de tratamiento para campos médicos como ortopedia, neurología, medicina estética, dermatología, angiología, reumatología y medicina deportiva. También le permite al usuario crear sus propios programas y realizar la terapia en modo manual. Agregar un programa a la lista de Favoritos le permite encontrar rápidamente los parámetros más utilizados en la terapia de ultrasonido.



TERAPIA LIPUS

El dispositivo PhysioGo.Lite SONO ofrece no sólo los tratamientos clásicos de la terapia por ultrasonidos, sino también la posibilidad de realizar la terapia LIPUS (Ultrasonido Pulsado de Baja Intensidad), utilizando ondas de ultrasonido pulsadas de baja frecuencia. Este método es especialmente valorado por su eficacia en el fomento del tratamiento de heridas, quemaduras, daños en los nervios, enfermedades degenerativas y fracturas de huesos. También es un excelente apoyo en el tratamiento de la no unión (llamada pseudoartrosis) y el retraso de la unión ósea.

